



DIGIPETTE

dispenser bottle

digipette

DOSYPROOF

Диспенсър DOSYPROOF

Диспенсърите Dosyproof са проектирани за гладко, удобно и ефективно дозиране на течности, които често се използват за лабораторни цели.

Подходящата комбинация от материали, като флуорополимери, политетрафлуоретилен, Хастелова сплав, боросиликатно стъкло или полипропилен, предоставят широка химическа съвместимост, като се гарантира дълъг живот на продукта.

Предлага се в различно регулируеми обемни капацитети, като обхваща различни видове от 0,5 до 50 мл. Диспенсърите са снабдени с различни адаптери, позволяващи дозиране в няколко бутилки едновременно.



DOSYPROOF диспенсър

Характеристики

[01] Автоклавируем

Тези диспенсери са устойчиви на парна стерилизация до 121°C и налягане 2 bar (15 psi) в продължение на 20 минути.

[02] Адаптери

Дозаторите имат 45 мм резбована база и са снабдени с различни адаптери в зависимост от модела, както следва:



Обем	Полипропиленов адаптер
0.5– 5 мл	GL 25, GL 28, GL 32, GL 38, S40
1 – 10Мл	
2.5– 25млl	
5 – 50мл	GL 32, GL 38, S 40

[03] Удължена тръба

Гъвкавата тръба за изтичане е с безопасна дръжка и позволява бързо и прецизно дозиране.




[04] Лесна поддръжка

Разглобяването и сглобяването е лесно благодарение на ограниченият брой части. Основни части, като клапани, бутало, цилиндър и дюза могат да се свалят за секунди за да бъдат почистени.

Dosyproof диспенсьор

дозатор DOSYPROOF

Техническа спецификация

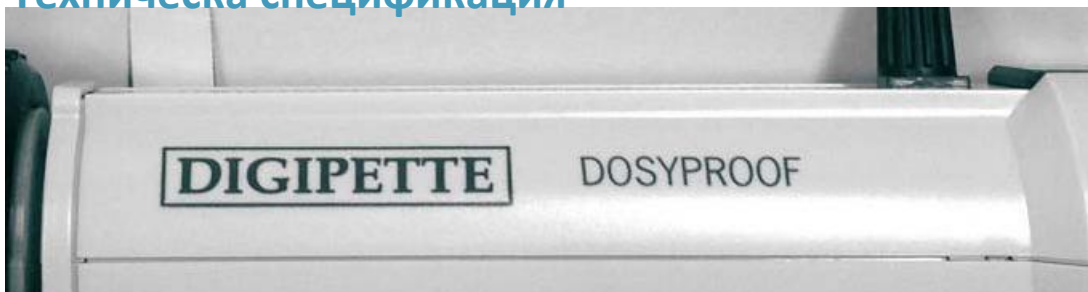

Номер	Обем	Градуировка	P \leq ±		CV \leq	
			%	μ l	%	μ l
66650001	0.5 - 5 mL	0.1 mL	0.5	25	0.1	5
66650002	1 - 10 mL	0.2 mL	0.5	50	0.1	10
66650003	2.5 - 25 mL	0.5 mL	0.5	125	0.1	25
66650004	5 - 50 mL	1.0 mL	0.5	250	0.1	50

P = Прецизност

CV = Коефициент на вариация

DOSYPROOF диспенсър аксесоари (не са включени)

Това са аксесоарите за заместване или резервни компоненти, както и за допълване приложенията на устройството:

Номер	Описание
96650001	Адаптер S40, 45/40 mm
96650002	Адаптер GL38, 45/38 mm
96650003	Адаптер GL32, 45/32 mm
96650004	Адаптер GL28, 32/28 mm
96650005	Адаптер GL25, 32/25 mm
96650006	Захранваща тръба (m)
96650007	Дозираща тръба (m)



Labimex Ltd.

Distr. Goce Delchev, bl. 261,
Office "Ch"

1404 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 4219850
fax: +359 2 9621501

www.labimex.bg

Лабимекс ООД
кв. Гоце Делчев, бл. 261, офис
"Ч"

1404 София, България

тел.: 02/4224160
факс: 02/962 1501

www.labimex.bg



AUXILAB S.L.
Material de laboratorio
Laboratory supplies